

Ovaj prijevod sastoji se od

str. 4 /listova 4

Datum: 01. 11. 2013

Broj ovjere: 367 /2013

**Ovjereni prijevod sa engleskog jezika
na hrvatski jezik**



MULTIFLEX

Zaštita žarulje

Pogonski zrak

Ispušni zrak

Sprej vode


Sprej zraka

3.1.2

Volumen vode može se precizno odrediti pomoću okretnog prstena

Električni kontaktni pinovi

Ispušni zrak

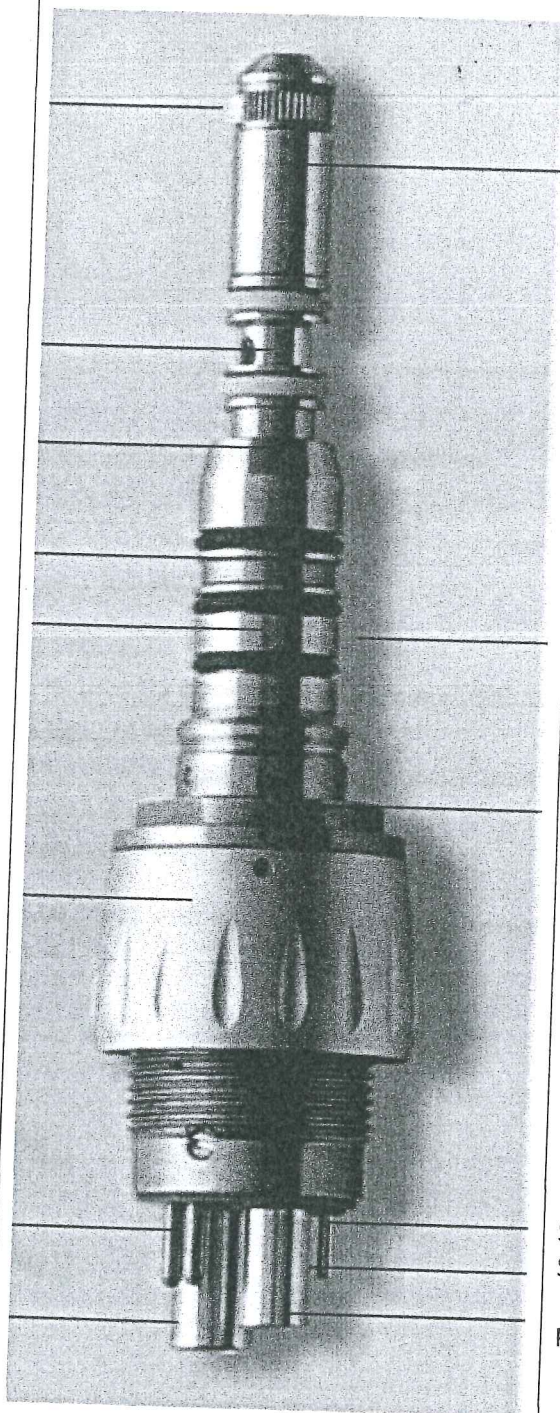

3.1.3




KaVo visokotlačna žarulja integrirana je u MULTIflex adapter i može se lako i brzo zamijeniti

Plombe – svi su dijelovi odvojeni jedni od drugih

Sigurnosni prsten adaptera

Sprej vode
Sprej zraka

Pogonski zrak

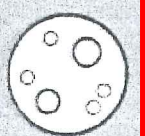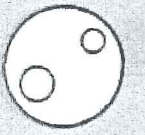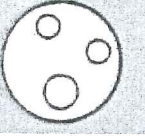
Standardni spoj s 4 rupe sa svjetlom		Standardni spoj s 4 rupe bez svjetla
Standardni spoj s 2 rupe (Borden)		Siemens spoj s 4 rupe
Yoshida spoj		Morita mini spoj

KaVo nudi odgovarajući MULTIflex adapter za sve turbinske spojeve.

MULTIflex adapter prilagodljiviji je nego što mislite:

- Sve turbine s MULTIflex spojem
- SONICflex, oscilirajući instrument za operacije s vrhovima SONICSYS, SONICFLEX strugačem, itd
- PROPHYFELX za profesionalno čišćenje zuba
- CORONAFlex za bezbolno skidanje kruna i mostova pomoću komprimiranog zraka
- Svi INTRAFlex instrumenti s LUX motorom
- Zračni motor 181M te stoga svi INTRAMatic ručni nastavci

CORONAFlex – za jednostavno i bezbolno skidanje kruna i mostova pomoću komprimiranog zraka

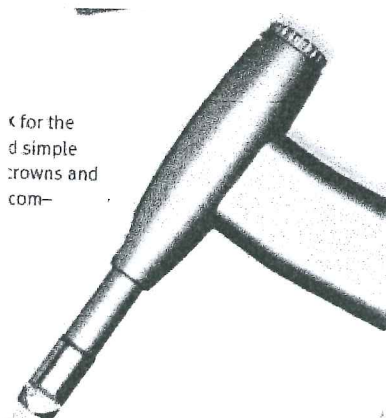


« for the
d simple
crowns and
com-

PROPHYFLEX3 – instrument za poliranje za profesionalno čiščenje zuba


for professional tooth
cleaning




INTRAFLEX LUX - motorni instrumenti

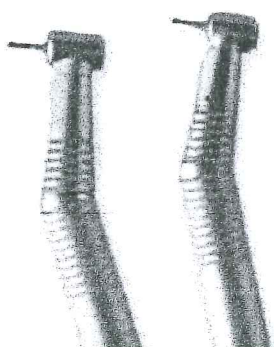


MOTOR 181M – Zračni motor 181M | stoga svi INTRAmatic ravni ručni nastavci

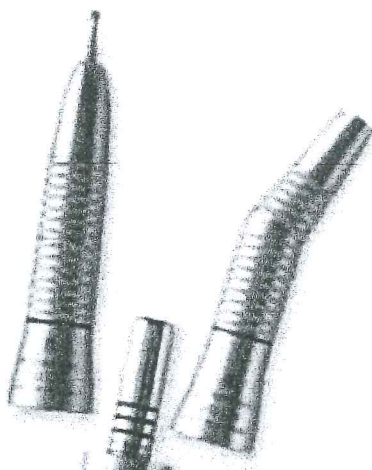

SONICflex Airscaler – oscilirajući instrument sa širokim rasponom indikacija sa SONICSYSom, SONICflex strugačem, itd

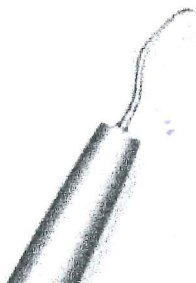

KaVo turbine s MULTIflex spojem

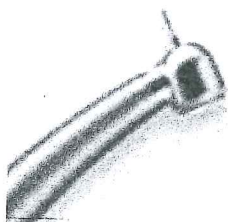

KaVo RONDOflex je zgodna alternativa konvencionalnim sustavima abrazije zrakom



Ja, **Daniela Vujević, dipl. pravnik i stalni sudski tumač za engleski jezik**, iz Velike Gorice, Bratstvo 21, imenovana Rješenjem Predsjednika Županijskog suda u Velikoj Gorici broj **4 Su-310/07-3 od 01. lipnja 2011.** godine potvrđujem da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku/preslici sastavljenom na **engleskom** jeziku.

Datum: 01 11 /2013

Daniela Vujević, dipl.iur.


Ovlašteni sudski tumač za engleski jezik



Daniela Vujević

KaVo MULTiflex®-System

Just a "Click" does
the trick!

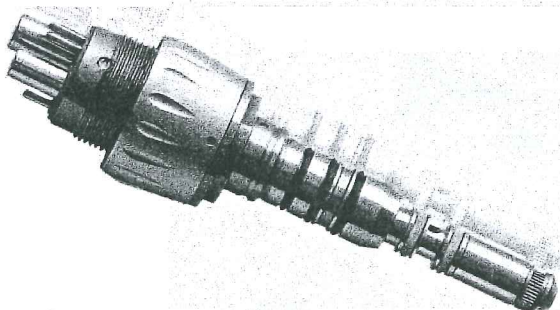

Coupling safety ring

sealed
all services are sealed

Specify air

KaVo

tublin
ection

1000

Edo-01, 19941337 06/02-01 en We reserve the right to make technical modifications. Both usage differences are due to the printing errors. © Edmont Kaku Terada (Irish)

KaVo. Dental Excellence.



The Kavo MULTITEX®-System

Just click on - and it's ready.

Systems that are perfectly precise are both easy to use and safe. The Kavo MULTITEX®-system ensures that your work is uninterrupted when you change instruments. Regardless of the type of operation you are carrying out, the MULTITEX®-coupling will always provide you with the appropriate connection for a multitude of instruments, and at the same time guarantees that you quickly have the right instrument at hand.

Just a quick push and a "click" - and that is sufficient to connect your new instrument onto the MULTITEX®-coupling. That means smooth operational sequences through quick changes of the instruments. What's more: the superb adaptability of the MULTITEX®-System guarantees you high efficiency through an extensive range of instruments.

When connected, the Kavo-instruments or turbines can be swivelled through a full 360°, without any annoying tension in your wrist, and without tubings becoming twisted. The instrument is simply separated from the MULTITEX®-coupling and replaced by an alternative one.

Furthermore, the built-in original Kavo non return valve prevents contaminated water from entering the system.

It's in your hands: the versatility of the MULTITEX®-coupling system saves time and money, without unnecessary interruptions of your work.

A multi functional connection.

PROPHYLEX 3
polishing instrument
for professional tooth
cleaning

CORONAflex
for the
painless and simple
removal of crowns and
bridges via com-
pressed air

MULTITEX®-coupling
is more adaptable than
you might think:

- ▶ all turbines with MULTITEX®-connection
- ▶ SONICflex, the oscillating instrument for tip operations with SONICUSYS, SONICflex® rootplaner etc.
- ▶ PROPHYLEX for professional tooth cleaning
- ▶ CORONAflex for the painless removal of crowns and bridges via compressed air
- ▶ all INTRAflex LUX-motor instruments
- ▶ air motor 181 M and therefore all INTRAflex shanks and handpieces

INTRAflex LUX
Motor instruments

SONICflex Airscalp,
the oscillating instrument with a wide range of handpieces with SONICUSYS, SONICflex® rootplaner etc.

Kavo-turbine with MULTITEX®-connection

KAVO RONDOflex is
the convenient alternative
to conventional
air abrasion systems.

135°C
All instruments can
be sterilised at up to
135° C in an autoclave.